

QuaCell® CHO Feed03 Supplement

连续电转神辅助




产品优势

无血清、无动物源成分

- 电转专用, 帮助电转染损伤细胞迅速恢复
- 适用性广, 适用于 CHO-S、K1 等细胞
- 高表达量, 促进瞬转细胞持续高表达
- 活率维持, 保持培养后期细胞活率
- 使用方便, 10Day 以上仅需补料 2 次

数据展示

图1. ExpiCHO-S 细胞在电转染后添加 Feed03 与其他商品化补料的生长恢复及瞬时表达对比。基础培养基: QuaCell CD04 (Cat.#A11004); 对照: 供应商C的电转专用补料; 125mL摇瓶, 工作体积30mL, 中25mm, 125rpm, 湿度75%, 5%CO₂, 37°C培养11天。参照各自说明书补料策略, 配合流式电转设备使用。

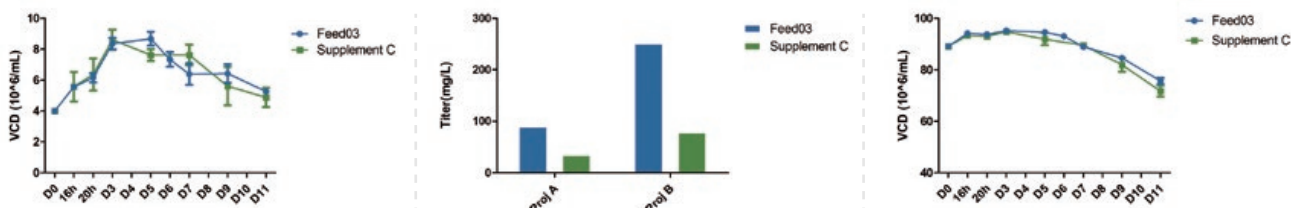

订购信息

产品名称	货号	类型	规格
QuaCellR CHO Feed03 Supplement	A11903	液体	Set

LEPURE
www.lepurebiotech.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区茸欣路 269 弄 1 号 Tel: 400-902-0506
Email: support@lepurebiotech.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Email: contacts@lepurebiotech.com