

硅胶穿刺膜片

胶穿刺膜片是取样装置中的一部分,可以确保每次穿透后完成取样时,穿刺膜能够自密封。使用金属针(外径不超过1.3mm)穿刺膜片,取样容器可使用注射器、取样袋或取样瓶等。每个取样端口仅可穿透一次,当所有8个端口都被穿透后,采样单元中的膜片将被快速简单的操作替换。乐纯生物的硅胶穿刺膜片有两种规格可选,可满足客户实际工艺中的不同需求。



产品优势

- 操作简单快捷
- 可实现多次取样
- 可实现自密封
- 允许在线清洗(CIP)和在线灭菌(SIP)
- ADCF:无动物源

典型应用

广泛应用于不锈钢罐体在生产过程中的取样,如:

- 缓冲液配制
- 培养基配制

技术参数

耐压范围	-1~7 bar
温度范围	-10~200°C
采样说明	每个取样单元有8个取样端口,每个取样端口仅允许采一次样
材质	铂金硫化硅橡胶
原材料标准	符合REACH, ROHS要求/不含双酚A及乳胶
有效期	5年

法规符合性

测试标准	测试项目	测试结果
USP<85>	细菌内毒素	<0.25EU/mL
USP<88>Class VI	体内生物相容性	通过
ISO10993	生物相容性	通过


订购信息

货号	描述	标准包装规格
LSPD3205	硅胶穿刺膜片, 厚度5mm	100个/包
LSPD3206	硅胶穿刺膜片, 厚度5.4mm	20个/包

备注: ① 该产品并非以无菌形式销售; ② 最小起订量20个



使用前

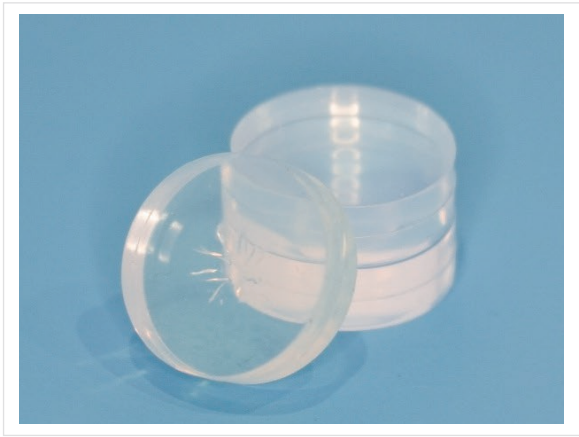

使用后

LEPURE
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com